

EXPORT TRADE CATALOGUE 2022



LECTUS
ARGENTINA

» DESINFECTANTES Y SANTIZANTES

» ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL PARA SALUD

» EQUIPAMIENTO MÉDICO [CONSULTAR]

» JERINGAS [CONSULTAR]

» KIT ODONTOLÓGICOS [CONSULTAR]

» KIT PARA DETECCIÓN DE DIABETES
[CONSULTAR]



EXPORT TRADE CATALOGUE 2022

» **DESINFECTANTES Y SANTIZANTES**

SURFANIOS PREMIUM

DETERGENTE DESINFECTANTE SUELOS Y SUPERFICIES

SURFA´SAFE PREMIUM

ESPUMA DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES MEDIAS Y DISPOSITIVOS

FELSIGEL PLUS

SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA PARA LA HIGIENE DE MANOS POR FRICCIÓN



LECTUS
Confianza en
Desinfección

APROBADO CONTRA COVID19

NORMA EUROPEA EN14476

SURFANIOS PREMIUM


LIMPIEZA + DESINFECCIÓN SEGURA FÁCIL, RÁPIDA Y PROFUNDA

HABITACIONES
233-246
HABITACIONES
247-254



CARACTERÍSTICAS

- Solución de color: verde
- pH del producto puro: 11.2
- pH del producto diluído: aprox. 8
- Densidad: 1.007
- Índice de refracción : 1.3587

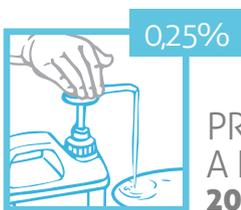

PRODUCTO
A DILUIR
20 ML > 8 L

INDICACIONES

Limpieza y desinfección
de suelos, paredes,
paneles y grandes
superficies en general.

Eficacia demostrada en **bacterias, microbacterias, levaduras, mohos y virus** en espacios comunes de alto tránsito.

- PRODUCTOS QUE COMBINAN LAS ACCIONES DETERGENTE Y DESINFECTANTE EN UNA OPERACIÓN SIMULTÁNEA
- PRODUCTO FORMULADO SIN ALDEHÍDO
- OPTIMIZACIÓN DE LA INFORMACIONES ECOTOXICOLÓGICA

AGENTE OFICIAL





LECTUS
Confianza en
Desinfección

SURFANIOS PREMIUM

DETERGENTE DESINFECTANTE SUELOS Y SUPERFICIES

MODO DE EMPLEO

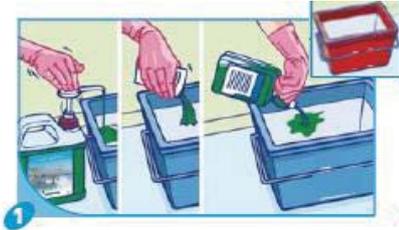

1 Llenar un recipiente de lavado y un recipiente de aclarado con 8 litros de agua. Diluir 20 ml de SURFANIOS PREMIUM en el recipiente de lavado.



2 Proceder al lavado respetando el esquema desde el fondo hacia la salida. Dejar secar. No aclarar.



3 Lavar y escurrir el paño o mopa antes de colocar en el producto.



4 Después de limpiar cada sector cambie el paño y renueve la solución. Introduzca los paños sucios en el recipiente previsto.

COMPOSICIÓN

- N - (3-AMINOPROPIL) - N - DODECILPROPANO - 1,3 - DIAMINA
- CAS N° 2372-82-9 (51 MG/G), CLORURO DE DIDEILDIMETILAMONIO
- CAS N° 7173-51-5 (25 MG/G), EXCIPIENTES

PRECAUCIONES DE EMPLEO

PELIGROSO. RESPETAR LAS PRECAUCIONES DE USO (ESTABLECIDAS SEGÚN LA DIRECTIVA 99/45/CE Y SUS ADAPTACIONES). UTILIZAR LOS BIOCIDAS CON PRECAUCIÓN. ANTES DE SU UTILIZACIÓN, LEER LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PRODUCTO. ALMACENAR ENTRE +5°C Y +35°C. BIOCIDA PARA LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES (GRUPO PRINCIPAL 1 - TP2).

DE USO RESERVADO A LOS PROFESIONALES.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Activo sobre	Normas	Tiempo de contacto		
		0,25%	0,5%	1%
Bacterias	EN 1040, EN 1276, EN 13727	5 min.		
	BMR (EN 1276)	5 min.		
	EN 13697	30 min.	15 min.	
	BMR (EN 13697)	15 min.		
Micobacterias	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	60 min.	30 min.	
	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	60 min.	30 min.	
Levaduras	EN 1275, EN 1650	15 min.		
	EN 13697	30 min.	15 min.	
Mohos	EN 1275	15 min.		
	EN 13697	30 min.		15 min.
	EN 1650	120 min.		
Virus	Según EN 14476 HIV-1, PRV (virus modelo de HBV), BVDV (virus modelo HCV), Herpès virus	5 min.		
	Vacciniavirus	60 min.	15 min.	

ACONDICIONAMIENTO SURFANIOS PREMIUM

- 12 frascos de 1 litro con dosificador
- 4 bidones de 5 litros con 1 bomba dosificadora de 20 ml



Av. Néstor Kirchner (ex Mitre) 3242/48 Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
+54.11.4258-4494 / 6009.2071 | info@lectus.com.ar | www.lectus.com.ar





APROBADO CONTRA COVID19

NORMA EUROPEA EN14476

SURFA´SAFE PREMIUM

LIMPIADOR + DESINFECTANTE

EN ESPUMA

SIMPLE, PRÁCTICO Y EFICAZ



CARACTERÍSTICAS

- Fórmula sin alcohol, sin perfume y sin CMR
- Eficacia antimicrobiana rápida: bacterias incluida BHR y Rotavirus a partir de 2 min.
- Amplia compatibilidad con los materiales
- Espuma densa para limitar el goteo del aerosol durante su difusión



**LISTO
PARA USAR**

INDICACIONES

Espuma detergente desinfectante de superficies medias y dispositivos.

Espuma detergente desinfectante para la **limpieza y desinfección** en forma rápida de superficies medias, estructuras externas de **equipos, pantallas y dispositivos**.

- Limpiador y desinfectante todo en uno de amplio espectro antimicrobiano
- Dispensador de espuma compacta para limitar la formación de aerosol y la volatilidad de los componentes (750 ml)
- Fórmula que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de materiales incluidos los polímeros (ej: policarbonato, plexiglás, etc.)
- Secado rápido de las superficies y sin restos
- Biocida de tipo 4 que puede usarse en las superficies que puedan entrar en contacto con productos alimentarios, seguido de un aclarado
- Mejora del perfil ecotoxicológico: reducción de emisiones de GEI* del 7% con respecto a un producto de igual aplicación
- pH: 6 +/- 0,5
- * Gas de efecto invernadero



LECTUS

Confianza en
Desinfección

SURFA´SAFE PREMIUM

ESPUMA DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES MEDIAS Y DISPOSITIVOS

MODO DE EMPLEO



Rociar en un paño no tejido o rociar directamente en la superficie. Cada disparo contiene 7ml de producto, se recomienda de 1 a 2 disparos por m2.

Repasar la superficie a tratar.

Dejar secar. En superficies en contacto con alimentos, piel o mucosas se recomienda aclarar con un paño embebido con agua.

Modo de empleo del SURFA´SAFE PREMIUM* en Superficies

COMPOSICIÓN

- CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO
- CAS 7173-51-5: 3 MG/G, EXCIPIENTES

PRECAUCIONES DE EMPLEO

PELIGROSO – RESPETE LAS PRECAUCIONES DE USO (ESTABLECIDAS SEGÚN LAS NORMAS EUROPEAS VIGENTES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS). UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL BIOCIDA ANTES DE USARLO.

ALMACENAR ENTRE +5° C Y +35° C. PRODUCTO BIOCIDA DESTINADO A LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN CONTACTO O NO CON LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS (GRUPO 1-TP 2 & 4) -

USO RESERVADO A LOS PROFESIONALES. DISPOSITIVO MÉDICO DE LA CLASE IIA. (DIRECTIVA 93/42/CEE MODIFICADA).

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Activo frente a	Normas	Tiempo de contacto
Bacterias	EN 1040, EN 13727, EN 13697	2 minutos
	Segundo EN 13727 sobre ERV, A. baumanniiβLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM, Listeria monocytogenes, Salmonella enteridis	1 minuto
	Segundo EN 13697 sobre ERV, A. baumanniiβLSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM, Listeria monocytogenes, Salmonella enteridis	2 minutos
Levaduras	EN 1275, EN 13697	5 minutos
	EN 13624	2 minutos
Mohos	EN 1275, EN 13624, EN 13697	20 minutos
	Segundo EN 13624, EN 13697 sobre Aspergillus fumigatus y Tricophyton mentagrophytes	15 minutos
Virus	EN 14476 : Adenovirus, MNV	30 minutos
	Segundo EN 14476: sobre HIV-1, PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Vacciniavirus*, HSV, Rotavirus, VRS	1 minuto
	Segundo EN 14476 : sobre Polyomavirus SV 40, Coronavirus	5 minutos

ACONDICIONAMIENTO SURFA´SAFE PREMIUM

- 12 envases de 750 ml con dispensador de espuma



*El Robert Koch Institute recomienda la utilización de desinfectantes con la indicación "begrenzt viruzid wirksan", es decir, actividad virucida limitada, para interrumpir la cadena de transmisión. Según este instituto, la actividad virucida limitada corresponde a una actividad sobre el virus de la viruela y el de la BVDV. La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición.



Av. Néstor Kirchner (ex Mitre) 3242/48 Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
+54.11.4258-4494 / 6009.2071 | info@lectus.com.ar | www.lectus.com.ar





FELSIGEL PLUS

Simple, seguro y eficaz



CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Gel translúcido, libre de partículas
- Color: Incoloro
- Olor: Característico según patrón standard
- pH (20 °C): 6.2 -7.8
- Viscosidad (S4V6): 2500-10000 cps



LISTO

LISTO PARA
SU USO
**2 PRESIONES DE BOMBA
= 3 ML**

INDICACIONES

Solución hidroalcohólica para la higiene de manos por fricción.

FELSIGEL PLUS posee fórmula concebida para el **uso frecuente e intenso** del profesional.

Producto **no irritante**, Test de Irritación Primaria Dérmica, según estudio estudio OECD Guideline for the testing of chemicals 404, April 2002.

Probado bajo control dermatológico, fórmula hipoadérgica.

- FELSIGEL PLUS ALCANZA UNA VISCOSIDAD DE EQUILIBRIO INMEDIATA EN CONTACTO CON LA PIEL, EVITANDO DERRAMAMIENTOS Y GENERANDO UNA AGRADABLE TEXTURA
- FELSIGEL PLUS POSEE EMOLIENTES Y SUSTANCIAS QUE MEJORAN LA EFICACIA Y TOLERANCIA DE LA PIEL, PROTEGIÉNDOLA AÚN CON EL USO FRECUENTE



LECTUS

Confianza en
Desinfección

FELSIGEL PLUS

SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA PARA LA HIGIENE DE MANOS POR FRICCIÓN

MODO DE EMPLEO



Verter una dosis en la palma de la mano.
Tratamiento higiénico: 3ml / 30 segundos



Frotar según la técnica EN 1500. No aclarar. No secar.

COMPOSICIÓN

- AGUA DESIONIZADA
- ALCOHOL ETÍLICO
- ALCOHOL ISOPROPÍLICO
- ALFA BISABOLOL
- OLIGOVITA
- GLICERINA USP
- CARBOPOL ULTREZ 21
- TRIETANOLAMINA

PRECAUCIONES DE EMPLEO

EVITAR CONTACTO CON LOS OJOS.
EN CASO DE IRRITACIÓN
SUSPENDER SU USO Y CONSULTAR
AL MÉDICO. USO EXTERNO.

ALMACENAJE

PRODUCTO INFLAMABLE.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

99,999% EFICACIA

E. COLI ATCC 8739

S. CHOLERAESUIS ATCC 10708

S. AUREUS ATCC 6538

A. BRASILENSIS ATCC 16404

C. ALBICANS ATCC 10231

ACONDICIONAMIENTO FELSIGEL PLUS

- 20 unidades x 250 ml. con bomba dosificadora
- 12 unidades x 500 ml. con bomba dosificadora
- 12 unidades x 1 litro con bomba dosificadora
- 12 unidades x 1 litro airless

Av. Néstor Kirchner (ex Mitre) 3242/48 Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
+54.11.4258-4494 / 6009.2071 | info@lectus.com.ar | www.lectus.com.ar


LECTUS
Confianza en
Desinfección



FOTOS NO CONTRACTUALES

EXPORT TRADE CATALOGUE 2022

» **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL PARA SALUD**




LECTUS
Confianza en
Desinfección

»CUBRE BOTAS
»CHAQUETAS
»DELÁNTALES
»COFIAS
»OVEROLES
»CUBRE CAMILLAS
AVIOCARE®

DESCARTABLES **PM 734-36**

FOTOS NO CONTRACTUALES

EQUIPOS DE PROTECCIÓN NORMALIZADOS PARA SALUD



PRODUCTO AUTORIZADO
POR LA ANMAT - PM 734-36

Av. Néstor Kirchner (ex Mitre) 3242/48 Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
+54.11.4258-4494 / 6009.2071 | info@lectus.com.ar | www.lectus.com.ar



»»CUBRE BOTASAVIOCARE®



DESCRIPCIÓN

Cubre calzado descartable de uso médico utilizado como barrera física para la protección entre el profesional de salud y el paciente contra fluidos corporales, saliva, sangre, salpicaduras y otros.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrorepelente
- Doblado Quirúrgico
- Cubre todo el zapato, llega encima de los tobillos
- Tamaño universal

»»CHAQUETASAVIOCARE®



DESCRIPCIÓN

Chaqueta descartable de uso médico utilizado como barrera física para la protección entre el profesional de salud y el paciente contra fluidos corporales, saliva, sangre, salpicaduras y otros.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrorepelente
- Doblado Quirúrgico
- Escote en V
- Talles varios

»» DELANTALES AVIOCARE®



DESCRIPCIÓN

Delantal descartable de uso médico utilizado como barrera física para la protección entre el profesional de salud y el paciente contra fluidos corporales, saliva, sangre, salpicaduras y otros.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrorepelente
- Doblado Quirúrgico

»» COFIAS AVIOCARE®



DESCRIPCIÓN

Cofia descartable de uso médico utilizado como barrera física para la protección entre el profesional de salud y el paciente contra fluidos corporales, saliva, sangre, salpicaduras y otros.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrorepelente
- Doblado Quirúrgico
- Elástico autoajustable
- Costura overlock

»»OVEROLES**AVIOCARE**®



DESCRIPCIÓN

Overol descartable de uso médico utilizado como barrera física para la protección entre el profesional de salud y el paciente contra fluidos corporales, saliva, sangre, salpicaduras y otros.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrorepelente
- Hemorepelente
- Con capucha y cierre delantero
- Elástico en puños y cintura
- Doblado Quirúrgico

»»CUBRE CAMILLAS**AVIOCARE**®



DESCRIPCIÓN

Cubre camilla descartable para uso de parte del personal de salud en salas de internación y/o quirófano con el fin de proteger y aislar al paciente del contacto directo con las camillas y/o mesas quirúrgicas.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrorepelente
- Ajustable
- Doblado Quirúrgico

»»SOLUCIONES A MEDIDA

**ARMAMOS KITS PERSONALIZADOS PARA
EMPRESAS, INSTITUCIONES Y GOBIERNOS.
¡CONSÚLTENOS!**

CAMISOLÍN AVIOCARE®

DESCARTABLE



Camisolín descartable de uso médico utilizado como barrera física para la protección entre el profesional de salud y el paciente contra fluidos corporales, saliva, sangre, salpicaduras y otros.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN NORMALIZADOS PARA SALUD




PRODUCTO AUTORIZADO
POR LA ANMAT - PM 734-32

Av. Néstor Kirchner (ex Mitre) 3242/48 Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
+54.11.4258-4494 / 6009.2071 | info@lectus.com.ar | www.lectus.com.ar



CAMISOLÍN AVIOCARE®

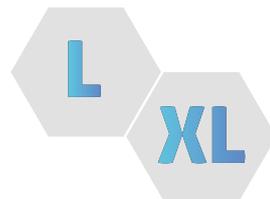

Talle L | Cod. P0264



DESCRIPCIÓN

Camisolín descartable de uso médico utilizado como barrera física para la protección entre el profesional de salud y el paciente contra fluidos corporales, saliva, sangre, salpicaduras y otros.

ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE



- Bolsa de Polietileno de máximo 10 unidades
- Doblado quirúrgico
- Pallet tipo ARLOG MERCOSUR (1.00 X 1.20 m), con altura máxima de 1.40 m incluyendo la tarima
- Embalaje secundario con cajas contenedoras
- Apilado de 4 filas con una base de 5 cajas

CARACTERÍSTICAS


- Tela no tejida SMS Uso Médico
- Hidrorepelente
- Gramaje: 30; 40; 45; 47 g/m² (+/-5%)
- Cuello redondo, costura overlock
- Ajuste de cuello, tiras de no menos de 20 cm
- Ajuste de cintura a 44 cm del borde del escote, de no menos de 70 cm
- Manga larga, con puño de tela tejida (no algodón), de 4 cm de largo, costura doble estanco

MEDIDAS MÍNIMAS

- Largo 120 cm
- Ancho 130 cm
- Manga 65 cm

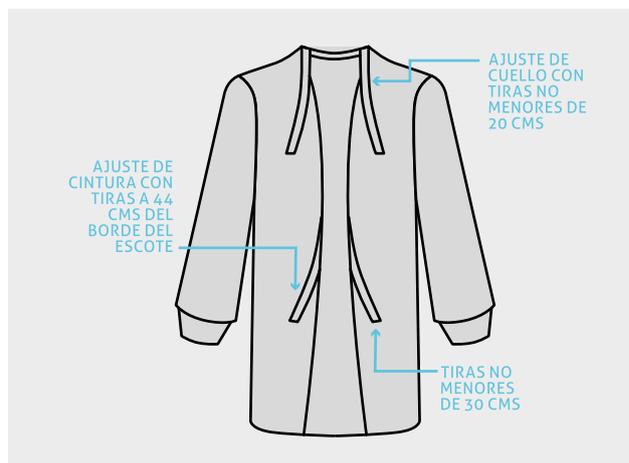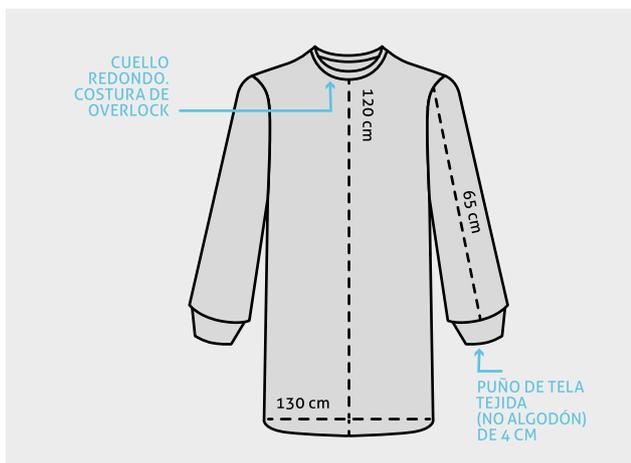

CAMISOLÍN AVIOCARE®

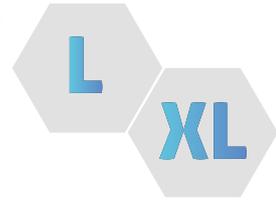

Talle XL | Cod. P0277



ACONDICIONAMIENTO Y EMBALAJE

- Bolsa de Polietileno de máximo 10 unidades
- Doblado quirúrgico
- Pallet tipo ARLOG MERCOSUR (1.00 X 1.20 m), con altura máxima de 1.40 m incluyendo la tarima
- Embalaje secundario con cajas contenedoras
- Apilado de 4 filas con una base de 5 cajas

DESCRIPCIÓN


Camisolín descartable de uso médico utilizado como barrera física para la protección entre el profesional de salud y el paciente contra fluidos corporales, saliva, sangre, salpicaduras y otros.

CARACTERÍSTICAS

- Tela no tejida SMS Uso Médico
- Hidrorepelente
- Gramaje: 30; 40; 45; 47 g/m² (+/- 5%)
- Cuello redondo, bordeado con cinta del mismo material
- Ajuste de cuello, tiras de no menos de 20 cm
- Ajuste de cintura a 44 cm del borde del escote, de no menos de 30 cm
- Manga larga, con puño de algodón 100 % (RIBB) elastizado de 10 cm de largo, costura doble estanco

MEDIDAS MÍNIMAS

- Largo 120 cm
- Ancho 140 cm
- Manga 75 cm

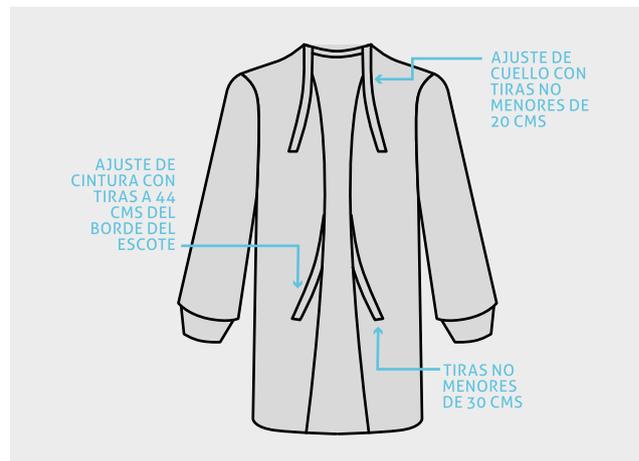

EXPORT TRADE CATALOGUE 2022

MÁS INFORMACIÓN:

Av. Néstor Kirchner (ex Mitre) 3242/48 Berazategui, Buenos Aires, Argentina.
+54.11.4258-4494 / 6009.2071 | info@lectus.com.ar | www.lectus.com.ar

